



Aktivt valg

Ekstra lav siddehøjde

C400 Corpus 3G Lowrider C400 er et smidigt chassis som du kan køre med indendørs på mindre arealer, samtidig med at den har den kapacitet det kræves for at køre udendørs. Vi har kombineret chassiset med vores Corpus 3G sæde som har alle de funktioner der kræves for at sidde godt. Du sidder med korrekt støtte i den ergonomiske sædepude og kan udnytte el-funktionerne som eksempelvis tilfunktion for yderligere aflastning. Du kan vælge fremad tilt på 5 grader som er ekstra hjælp ved forflytning. Lowrider har desuden ekstra lav siddehøjde som gør det nemmere at komme ind under borde.





Ryglæn

Delbar ryg. Vælg lav ryg for aktiv stiddestilling.

Ergonomisk sæde

Ergonomisk sædepude for ekstra støtte. Du kan vælge pude med Roho indlæg. Sædet har vinkeljusterbare armlæn og formede benstøtter.


Tiltfunktion

Tiltfunktion -5 grader for lettere forflytning.


Permolock C

Bilbespænding som gør at du kan bruge el-stolen som førersæde i bilen.


Farver

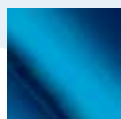


blå cobolt

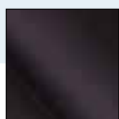

sort onyx

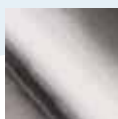

grå phantom

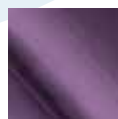

lilla deep



rød volcano




sølv platinum

Betræk



sort skai

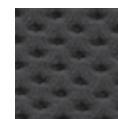

sort stof

Specifikationer

Vægt incl. batterier	175 kg
Længde	1130 mm
Bredde	620mm
Mindste transportlængde	900 mm
Sædehøjde (til siddeplade)	405 mm
Sædebredde	420-570 mm
Sædedybde	370-570 mm
Ryglænsøjde	545-670 mm
Ryglænsøjde lav ryg	470 mm

Armlænsøjde	justerbar
Tilt	0° -30° eller -5° -25
Ryghældning	85° -170°
Batterikapacitet	2x73 Ah
Kørestrækning	30-35 km
Max hastighed	7,5 km/h
Venderadius	665 mm
Forcerer forhindringer på	60 mm
Max brugervægt	150 kg (136kg med sædeløft)