



I FARTEN

Kombistolen C500 Corpus er fremstillet til dem der er aktive og har behov for at køre både ude og inde. Kraftige motorer giver tilstrækkeligt med trækkræft, og med den individuelle, justerbare affjedring, får du fantastisk kørekomfort, selv på ujævnt underlag. Stolen er smidig og har en venderadius der gør den meget anvendelig, selv indendørs. Corpus sædet med indbygget lænde og kropstøtter giver en god siddekomfort. Med el-funktioner og tilbehør, kan el-stolen tilpasses maximalt.

C500
CORPUS


permobil

THE POWER OF MOBILITY

EL-FUNKTIONER




CHASSISFARVER

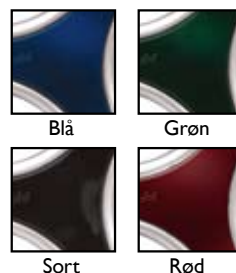

Separat el-regulering af rygvinkel, sædetilt og benstøtte vinkel.



CoPilot er en hjælperstyring det er meget enkel at anvende.

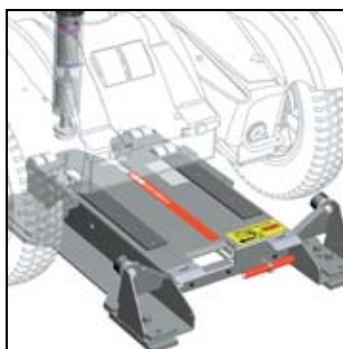

Permlock C, optimal sikkerhed ved transport i bil. Sid i din el-kørestol under transport.



ESP (Enhanced Steering Performance) som giver helt unikke køreegenskaber, på alle typer underlag og med alle typer af styring. ESP giver også fantastisk retningsstabilitet, især ved høj hastighed.



UniTrack tillbehørssystem. Du vælger dele og sammensætter en komplet støtte, der passer til dig. Den enkle løsning med skinne, leder og snaplås giver mulighed for hurtigt at ændre stilling og vinkel.



R-net elektronik med ICS. Du kan anvende alle el-funktioner, alle alternative styreformere. Med ICS systemet kan man gemme sine favorit sidde positioner.



Drivelink giver dig flere muligheder. Du kan anvende forskellige alternative styringer, omverdenskontrol, computere, telefoner etc.

C500 CORPUS™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	158 kg	Sædebredde	430/480 mm	Kørestrækning	30–35 km
Længde	1150 mm	Sædedybde	360–560 mm	Maks. hastighed	7,5–10 km/h
Bredde	675 mm	Ryglænsenhøjde	535/605 mm	Venderadius	715 mm
Mindste transportlængde	905 mm	Amlænsenhøjde	justerbar	Kan køre over kanter	70 mm
Sædehøjde*	520–720 mm	Batterikapacitet	2x73 Ah	Brugers maks.-vægt**	120 kg

*Lowrider: Sædehøjde 460-610mm

** Lowrider: Brugers maks.-vægt 150kg



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59, DK-2760 Måløv, Danmark. Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406. E-post: mail@permobil.dk

www.permobil.dk