



## I FARTEN

Kombistolen C500 Corpus er laget for deg som er aktiv og behøver å kjøre bra både ute og inne. Sterke motorer gir tilstrekkelig kraft, og med justerbar individuell fjæring får du kjørekomfort selv på tøffere underlag. Stolen er smidig og har en snuradius som klarer innendørskjøring. Corpussetet er ergonomisk med innebygd korsrygg- og sidestøtter, og høy ryggstøtte. Med el.funksjoner, andre ekstra funksjoner og tilbehør kan du tilpasse den maksimalt.



**C500**  
CORPUS



THE POWER OF MOBILITY

## EL. FUNKSJONER



Elektrisk setetilt, seteløft, benstøtte og rygg.

CHASSISFARGE



CoPilot, en ledsagerstyring som er enkel å bruke.




DriveLink gir deg flere muligheter. Du kan bruke alternative betjener, omgivelseskontroll etc.



C500 har ESP (Enhanced Steering Performance) som standard. Systemet korrigerer automatisk retningen på rullestolen ved ujevnt underlag og i høyere hastigheter. Har du en 10 km/t modell, så er ESP et selvskrevent pluss.



UniTrack tilbehørssystem. Du velger deler til en komplett støtte som passer til deg. Enkel løsning med skinne, ledd og hurtigfester gjør at du kan endre lengde og vinkel raskt.

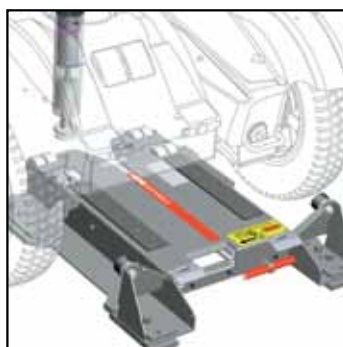

Permlock C rullestøllås for sikker ferd i bil. Sitt i din rullestol, selv når du kjører.



R-net elektronikk med ICS. Du kan bruke alle el.funksjoner, alternative styresystemer og har dessuten mulighet for å lagre favorittposisjoner.

## C500 CORPUS™ SPESIFIKASJONER

Vekt inkl. batterier	158 kg	Ryggstøtتهøyde	535/605 mm
Lengde	1150 mm	Armlene høyde	Justerbar
Bredde	675 mm	Batterikapasitet	2x73 Ah
Minste transportlengde	905 mm	Kjørelengde	30–40 km
Setehøyde *	520–720 mm	Maks hastighet	7,5–10 km/h
Setebredde	430/480 mm	Snuradius	715 mm
Setedybde	360–560 mm	Brukers maks vekt**	120 kg

\*Lowrider: Setehøyde 460-610 mm

\*\* Lowrider: Brukers maks vekt 150 kg

Spesifikasjoner er avhengig av hvordan rullestolen er konfigurert. Utarbeidet og utgitt av Permobil AB, Sverige Mars 2012.



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,  
1481 HAGAN, Norge.  
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.  
E-post: ks@permobil.com  
[www.permobil.no](http://www.permobil.no)