

permobil



SNABBT OCH LÄTT...

En mitthjulsdriven elrullstol med en riktigt stabil plattform och ett speciellt fjädringssystem som ger en säker körning. Det nya hjulupphängningssystemet gör dessutom att den har en ovanligt bra hindertagningsförmåga.

Corpus 3G sitsen ger dig ett sittande som stödjer kroppens naturliga former i design och funktion. Helheten ger en skön körkänsla. Du slipper stumhet och svaj i chassi och du har en ergonomisk sits som har en mängd justeringsmöjligheter.

M400

CORPUS 3G

ELFUNKTIONER



Sitslyft



Ryggstöd



Benstöd






Sitsvinkling



50° sitsvinkling med möjlighet till 5° framåt.
Rygglutning 85° bakåt och 5° framåt.

KLÄDSEL

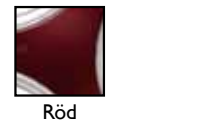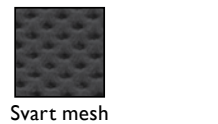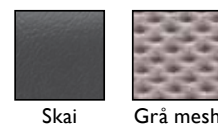

CHASSIFÄRGER



Nytt länkarmsystem med fjädring utnyttjar driv- och länkhjul på ett sätt som ger helt ny stabilitet vid hinder-tagning och ojämna ytor.



R-net elektronik med ICS. Du kan använda alla elfunktioner resp alternativa styrsystem och har dessutom möjlighet att spara favoritpositioner.



Delbar rygg med justering i 25 mm intervaller och lägre rygg höjd om du vill ha ett aktivt sittande.



Justerbara asymmetriska sidostöd hjälper till att ge stadigt sittande.



Sitsdyna med komfortyta, stabil form som ger stöd för ett bra sittande.



Armstöd kan justeras i vinkel, höjd och bredd.



Permolock C3 rullstolslås för säker färd i bil. Sitt kvar i din rullstol även när du kör.



Det svängda benstödet ger ordentligt stöd och en möjlighet till rejäl höjd/vinkeljustering av fotplattor.

M400 CORPUS 3G SPECIFIKATIONER

Vikt inkl. batterier	171 kg	Armstödshöjd	Justerbar
Längd	1105 mm	Batterikapacitet	2 x 60Ah (10 km/h)
Bredd	620 mm	Batterikapacitet	2X73Ah (10km/h S-modell 12 km/h)
Minsta transportlängd	815 mm	Körsträcka	30-35 km
Sitshöjd	510 mm	Max hastighet	10km/h S-modell 12 km/h
Sitsbredd	420-570 mm	Vändradie	585 mm
Sitsdjup	370-570 mm	Kanttagningsförmåga	60mm (70 i fart)
Ryggstödshöjd	545-670 mm	Max brukarvikt	136 kg
Ryggstödshöjd låg rygg	470 mm		



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AB.
Box 120, 861 23 Timrå, Sweden.
Tel: 060-59 59 00.

www.permobil.se