

X850

CORPUS 3G



Perfekt utomhus

Snabb och stark

X850 Corpus 3G Vår kraftfulla utomhusrullstol har inte bara ett robust utseende. Den är byggd för dig som kräver robusta prestanda. Behöver du en kraftig rullstol för att använda i stadsmiljö eller i vildmarken? Kanske bor du en bit från närmaste affär, tar dig till arbetet i rullstol, eller vill hänga med vännerna på en cykeltur? Du behöver en rullstol som klarar det, och som du kan lita på. X850 Corpus 3G är rätt val. Med bakhjulsdrift, kraftfulla motorer och stryktålig fjädring är detta en rullstol som är säker i 15 km/h.


Corpus 3G sitsens ergonomi gör att du sitter bekvämt även en längre tid. Sitsen kan roteras 180°, så det är lätt att ta sig i och ur stolen.



permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektriska funktioner

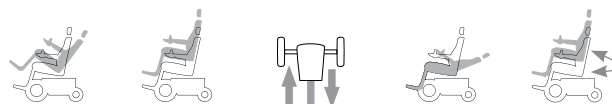



Ergonomisk sits

Skålad sittdyna för extra stöd. Du kan även välja dynan med luftfyllt Rohoilägg vid behov.

Hjul/Fjädring

Kraftig hjuldimension, robust justerbar fjädring och en tålig stötfångare av gummi.


Axelavstånd

Elektriskt justerbart axelavstånd som tillval.

Sitsvridning

Sitsvridning finns som tillval.

Färger

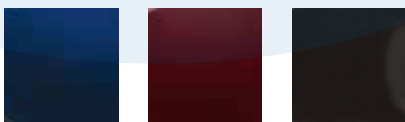


blå

röd

svart

Klädsel

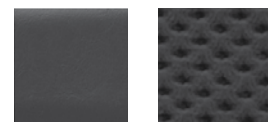

svart skai

svart tyg

Specifikationer

Total längd	1260 - 1460 mm
Total bredd	720 mm
Minsta transportlängd	1260 mm
Sitshöjd	540 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft	540 - 740 mm
Totalvikt inkl. batterier	203 kg
Vikt batterier	2 x 31 kg
Brukarens maxvikt	136 kg
Sitsbredd	420 - 570 mm
Sitsdjup	370 - 570 mm
Ryggstödshöjd	470, 545 - 670 mm
Ryggstödsbredd	360/410/460/510 mm
Armstödshöjd	185 - 320 mm
Bredd mellan armstöd	380 - 480/480 - 580 mm
Batterikapacitet	2 x 97 ah

Laddtid	11 tim
Körsträcka	35 - 45 km
Maxhastighet	15 km/h
Bromssträcka	3500 mm
Vändradie ISO 7176-5	1680 mm
Vändning i korridor	2250 mm
Kanttagsförmåga	110 mm
Manuellt benstöd *	20 - 70°
Elektrisk sitsvinkling	15°
Elektrisk sitslyft	200 mm
Elektrisk ryggstödslutning	35°
Manuell ryggstödslutning	45°
Justering axelavstånd	200 mm
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE	ja

*Manuellt benstöd kan endast väljas tillsammans med sitsvinkling. Benstödet är inte kompatibelt med sitsvridning eller justerbart axelavstånd.

Specifikationer är beroende på stolens konfiguration. För ytterligare information som inte nämns i detta produktblad hänvisar vi till bruksanvisning som kan laddas ner från Permobil's hemsida, eller kontakta Permobil Sveriges kontor.

www.permobil.se

Permobil AB, Per Uddéns väg 20, Box 120, 861 23 Timrå

permobil

THE POWER OF MOBILITY