



AKTIVT VALG

C400 Corpus er en kombination af innovativt design, formgivning og avanceret ingeniørkunst. Chassiet har en lav profil, men giver en god kombination af gode manøvreegenskaber indendørs, samt gode køreegenskaber udendørs. C400 er et godt valg hvis du har behov for en stol der ikke fylder så meget. Med det modul opbyggede Corpussæde, kan man ændre de fysiske former efter behov. eller man kan montere ekstra el-funktioner, i det omfang det er nødvendigt. Corpus sædet er helt enkelt et sædesystem med uanede muligheder.

C400
CORPUS

permobil

THE POWER OF MOBILITY

EL-FUNKTIONER




CHASSISFARVER



Separat el-regulering af rygvinkel, sædetilt og benstøtte vinkel.



CoPilot er en hjælperstyring det er meget enkel at anvende.

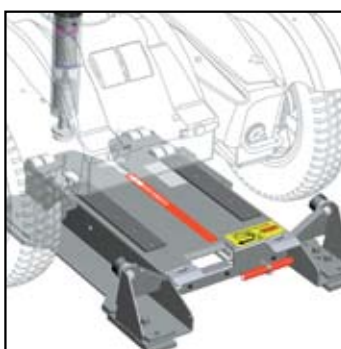

Permlock C, optimal sikkerhed ved transport i bil. Sid i din el-kørestol under transport.



ESP (Enhanced Steering Performance) som giver helt unikke køreegenskaber, på alle typer underlag og med alle typer af styring. ESP giver også fantastisk retningsstabilitet, især ved høj hastighed.



UniTrack tillbehørssystem. Du vælger dele og sammensætter en komplet støtte, der passer til dig. Den enkle løsning med skinne, leder og snaplås giver mulighed for hurtigt at ændre stilling og vinkel.



R-net elektronik med ICS. Du kan anvende alle el-funktioner, alle alternative styreformater. Med ICS systemet kan man gemme sine favorit sidde positioner.



Drivelink giver dig flere muligheder. Du kan anvende forskellige alternative styringer, omverdenkontrol, computere, telefoner etc.

C400 CORPUS™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	155 kg	Sædebredde	430/480 mm	Kørestrækning	30–35 km
Længde	1085 mm	Sædedybde	360–560 mm	Maks. hastighed	7,5 km/h
Bredde	620 mm	Ryglænsenhøjde	535/605 mm	Venderadius	665 mm
Mindste transportlængde	890 mm	Armlænsenhøjde	justerbar	Kan køre over kanter	70 mm
Sædehøjde	520–720 mm	Batterikapacitet	2x73 Ah	Brugers maks.-vægt	120 kg

*Lowrider: Sædehøjde 460-610mm



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59, DK-2760 Måløv, Danmark. Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406. E-post: mail@permobil.dk

www.permobil.dk