

permobil

THE POWER OF MOBILITY



Stark genug.

Alles, was Sie vom Corpus-Sitzsystem gewohnt sind. Nur noch stärker



Lernen Sie den **M400 Corpus HD** kennen, einen Schwerlast-Elektrollstuhl, der speziell für Nutzer mit einem Gewicht bis 205 Kilogramm entwickelt wurde. Der HD hat extrem stabile Arm- und Beinstützen und größere Fußstützen mit mehr Platz. Das weltweit bewährte Corpus Sitzsystem bietet ultimativen Komfort mit einem unübertroffenen Kippbereich von 0 bis 45° und einer beispiellosen Neigung von 85 bis 150°. Das M400-Fahrgestell ist sehr manövrierfähig und wurde für das HD-Modell verlängert und verbreitert. Auch die Federung wurde verstärkt, um insgesamt noch mehr Stabilität zu erreichen. Die ultrastarken Aktuatoren ermöglichen dem Benutzer, seine Füße sicher bis auf eine Höhe oberhalb des Herzens anzuheben, und die langlebige Polsterung aus Maschengewebe hält Feuchtigkeit vom Körper fern. In Verbindung mit der legendären Leistung und Belastbarkeit von Permobil kann der M400 Corpus HD allen Belastungen standhalten, die ein intensiver Lebensstil mit sich bringt.

M400

CORPUS **HD**

elektrische Funktionen





Beinstützen

Extrem haltbare, stabile verstellbare Beinstützen.

Fußplatten

Übergröße, einzeln einstellbare Fußplatten.

Starke Aktuatoren

Unglaublich starke Aktuatoren für die Sitzfunktionen.

Federung

Gesondert verstellbare Federung für eine angenehme Fahrt unter allen Bedingungen.


Farben*



black onyx



volcano red

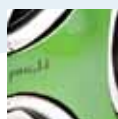

sublime green



platinum silver



cobalt blue



deep purple



phantom grey



pop star pink



leatherette



black fabric

* Einige Farben sind in Ihrem Markt unter Umständen nicht lieferbar.

Bezug

Technische Daten

Gesamtlänge	1190 mm
Gesamtbreite	660 mm
Geringste Transportlänge	875 mm
Sitzhöhe mit Elektroanhebung	460 - 660 mm
Gesamtgewicht mit Batterien	202 kg
Max. Benutzergewicht	205 kg
Sitzbreite	470 - 620 mm (in 50 mm-Schritten)
Sitztiefe	495 - 620 mm (in 25 mm-Schritten)
Breite der Rückenlehne	510, 560, 610 mm
Höhe der Rückenlehne	540, 620 - 745 mm (in 25 mm-Schritten)
Länge der Armauflage	335, 410, 460 mm
Neigung der Rückenlehne, verstellbar	elektrisch: 85 - 150°, manuell: 85 - 120°
Beinstützenwinkel, verstellbar	elektrisch und manuell: 85 - 175°
Akkuleistung	2x73 Ah
Reichweite (ISO 7176-4)	30 km

Höchstgeschwindigkeit	8 km/h
Geschwindigkeit Deutschland	6 km/h
Wendekreis (ISO 7176-5)	560 mm
Motorleistung	2 x 350 Watt
Hindernishöhe	60 mm
Bodenfreiheit	74 mm
Federung	ja
Elektronik	R-net
Elektrische Sitzanhebung	optional, 200 mm
Elektrische Sitzkipfung	optional, 0 - 45°
Elektrische Einstellung der Beinstützen	optional
Elektrische Rückenlehnenverstellung	optional
Garantie	2 Jahre
EN12182/EN12184 CE	ja