

TECHNISCHE STANDARDANGABEN	CORPUS	CS	MINIFLEX
Länge	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm
Breite	720 mm	720 mm	720 mm
Mindesttransportlänge	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Sitzhöhe ohne Sitzlift	560 mm	550 mm	530 mm
Sitzhöhe mit elektrischem Sitzlift	560 - 760 mm	550 - 750 mm	530 - 730 mm
Gewicht inkl. Batterien	190 kg	182 kg	170 kg
Max. Gewicht des Benutzers	136 kg	136 kg	35 kg
Sitzbreite	430 und 480 mm	450 mm	250/300/350 mm
Sitztiefe	310/410/460/510 und 560 mm	430 mm	250/300/350 mm
Rückenhöhe	535/605 mm	520 mm	325,375 und 425 mm
Rückenlehnenbreite	340/390 und 440 mm	nicht verstellbar	250/300 und 350 mm
Armlehnenhöhe	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Armlehnenlänge	250/300/350 und 400 mm	nicht verstellbar	200 und 250 mm
Abstand zwischen den Armlehnen	350/400 und 450 mm	nicht verstellbar	250 - 350 mm
Rückenlehne - verstellbar	90° - 130° manuell / elektr.	90° - 120° manuell	90° - 165° manuell
Beinstützen - verstellbar	nicht verstellbar	nicht verstellbar	90° - 150° manuell
Batteriekapazität	2 x 97 ah	2 x 97 ah	2 x 97 ah
Ladezeit	ca. 11 Std	ca. 11 Std	ca. 11 Std
Aktionsradius	35 - 45 km	35 - 45 km	35 - 45 km
Max. Geschwindigkeit	15km/h	15km/h	15km/h
Bremsweg	3500 mm	3500 mm	3500 mm
Wendekreis 180° nach Iso 7176-5	1680 mm	1680 mm	1680 mm
Überwindungshöhe bei Hindernissen	110 mm	110 mm	110 mm
Federung	ja	ja	ja
Elektrische Sitzlift	ja, 2000 mm	ja, 2000 mm	ja, 2000 mm
Elektrische Sitzkantelung	ja	nein	nein
Elektrische Beinstützenwinkelverstellung	nein	nein	nein
Elektrische Rückenlehnenwinkelverstellung	ja	nein	nein
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Abstand Sitz - Fußablage	340 - 560 mm		130 - 340 mm
Crash test erfüllt iso-standards	ja	ja	ja

STANDARDANPASSUNGEN	CORPUS	CS	MINIFLEX
Robuste, verstellbare Federung	*	*	*
Individuelle Federung auf den Vorderrädern	*	*	*
Kräftige Stoßfänger aus Gummi	*	*	*
Abstand manuell / elektrisch verstellbar	optional	optional	optional
Sitz in zwei Richtungen drehbar	optional	optional	optional
Individuell anpassbare Fahr- und Verstellungselektronik	*	*	*
Das Modulare Sitzsystem bietet individuelle Anpassungen im Bereich von Sitz und Rücken	*		*
Ergonomischer Sitz mit einstellbarer Rumpf- und Lendenunterstützung	*		
Rahmenfarbe	schwarz, rot und blau	schwarz, rot und blau	schwarz, rot und blau
Bezüge	Kunstleder oder Stoff	Kunstleder	Kunstleder oder Stoff

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	CORPUS	CS	MINIFLEX
Elektrischer Sitzlift	optional	optional	optional
Elektrisch verstellbarer Radstand	optional	optional	optional

STANDARDZUBEHÖR	CORPUS	CS	MINIFLEX
Rückspiegel	optional	optional	optional
Transportbox	*	*	*
Transportkorb	*	*	*
Überrollbügel	*	*	*
Griff / Stockhalter	*	*	*
Verstellbare Nackenstütze (hohe)	*	*	*
Oberschenkelstützen	*	*	*
Rumpfstützen	*	*	*
Nackenstütze	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Vierpunktgurt	*	*	*
Gurt mit Schnappverschluss	*	*	*
Gurt mit Rollautomat	*	*	*
Armauflagen	*	*	*
Batterien	*	*	*
Ladegerät	*	*	*


ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



The Power of Mobility

www.permobil.com

X850032010DU

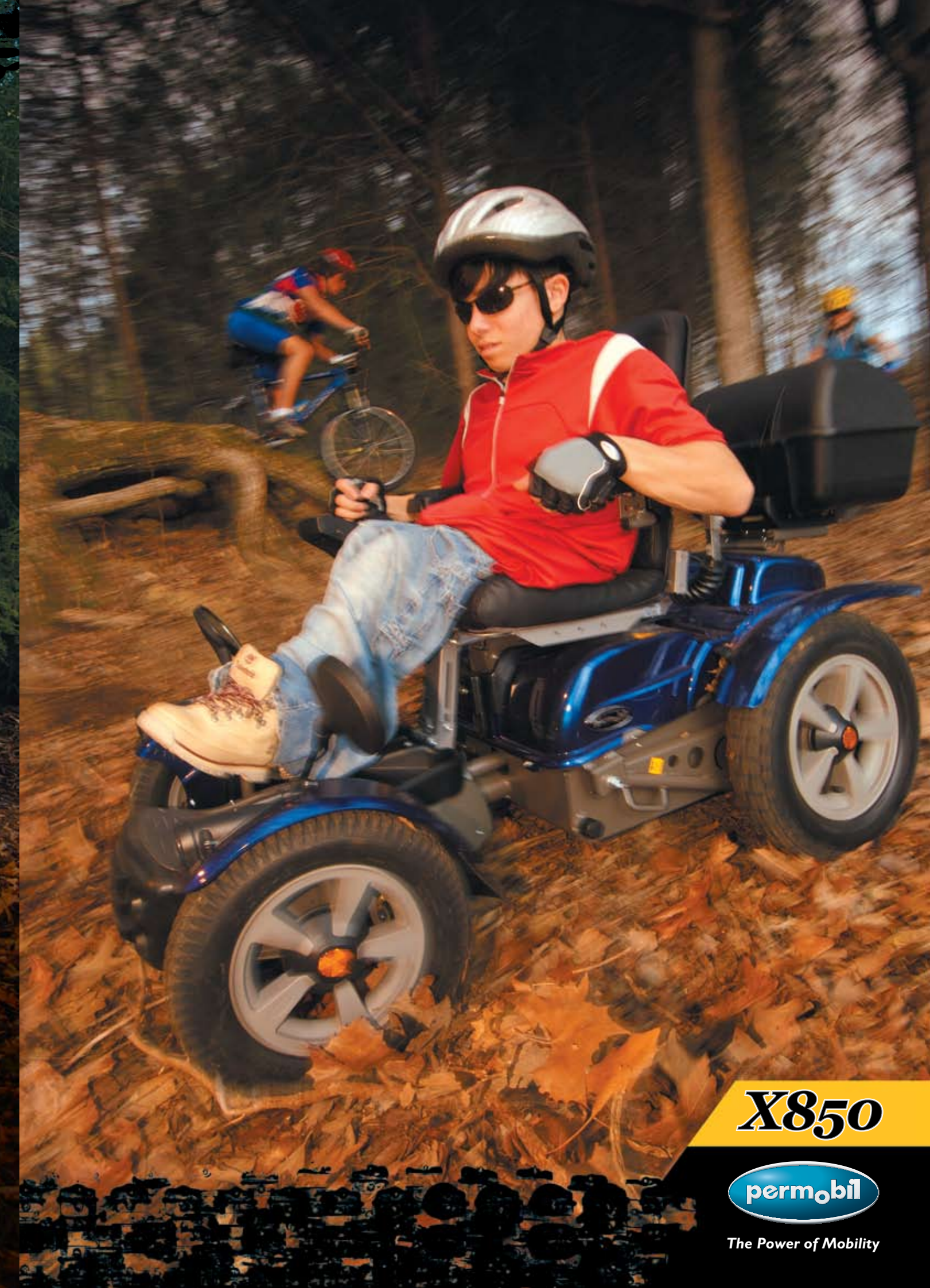

X850



The Power of Mobility

X850



X850 CS

X850 Corpus™

X850 Miniflex™

## Design für Draussen.

Der X850 ist unser neuester und stärkster Außen – Rollstuhl der nicht nur durch sein Design überzeugt, sondern auch durch seine hohe Belastbarkeit, eine extreme Beanspruchung zulässt. Der X850 ist der perfekte Begleiter für Stadt und Gelände! Auf unseren Offroaders der neuen Generation können Sie sich in jeder Situation verlassen. Egal ob es der Weg zum weiter entfernten Geschäft ist, auf Ihrem Weg zur Arbeit oder wenn Sie Freunde bei einer Radtour begleiten möchten. Der X850 hält jeder Belastung stand. Die leistungsstarken Motoren und die zwei 97 Ah- Power Gel - Batterien gewährleisten eine sehr hohe Reichweite.

Mit Hinterradantrieb, zwei starken Motoren und einer robusten Federung erhalten Sie einen Rollstuhl, mit dem Sie sich sicher mit 15km/h fortbewegen können. Die neue aktive Kurvenbeleuchtung, die der Fahrtrichtung folgt, bietet Ihnen auch bei Dämmerung ein optimales und sicheres Fahrgefühl. Der gefederte Spiegel und die widerstandsfähigen Gummistoßdämpfer unterstützen zusätzlich die Sicherheit und den Fahrkomfort. Sie haben die Möglichkeit, den X850 den Anforderungen von besonderen Krankheitsbildern und Ihren persönlichen Wünschen entsprechend zusammen zu stellen. Das Ausstattungsprogramm des X850 garantiert die medizinisch notwendigen Funktion sowie die Unabhängigkeit des Fahrers.

Der X850 ist, wie alle unsere Modelle, mit den höchsten Sicherheitsstandards ausgestattet. Er ist mit EPS (Elektronisches Stabilitätsprogramm) ausgerüstet, das den Antriebsmotor kontrolliert und dafür sorgt, dass Sie auch beim Abbiegen die volle Kontrolle über den Rollstuhl haben. Die Servolenkung, welche mit dem Joystick zu bedienen ist, kann zudem auf Ihre Bedürfnisse individuell eingestellt werden.



The Power of Mobility

www.permobil.com

### X850 CS

Der CS-Sitz bietet Ihnen ein bequemes Design mit einer klaren Formgebung. Der drehbare Sitz ist zu beiden Seiten zu 90° schwenkbar, so dass Ihnen das Ein- und Aussteigen extrem erleichtert wird. Sobald Sie die Option für Höhenverstellung ausgewählt haben, können Sie den Sitz per Knopfdruck bis zu 20 cm anheben. Wenn Sie eine Pause machen und sich ausruhen möchten, haben Sie die Möglichkeit, die Rückenlehne manuell zu verstellen. Zum leichteren Transport können Sie die Rückenlehne auch komplett runterklappen.



ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



### X850 Corpus™

Der Corpus Sitz ermöglicht Ihnen mehrere elektrische Funktionen. Über das Bedienfeld haben Sie die Möglichkeit, die Lage der Rückenlehne oder die Stellung der Fußstützen ganz einfach und ohne Kraftaufwand zu verstellen. Diese vielfältigen Funktionen unterstützen die Entlastung Ihres Körpers und sind, durch die einfache Handhabung, auf besondere Krankheitsbilder optimal abgestimmt. Ein elektrischer Sitzlift kann optional ausgerüstet werden. Ebenso wie der X850 CS™ bietet Ihnen der X850 Corpus™ einen um 90° schwenkbaren Sitz.



ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



### X850 Miniflex™


Der neue X850 Miniflex™ ist für Kinder bis 35 kg geeignet. Er bietet Ihnen und Ihrem Kind im Gelände und in der Stadt Sicherheit beim Fahren. Sie haben die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Sitztiefen und -breiten zu wählen. Auch für die Höhe und Breite der Rückenlehne haben Sie drei Wahlmöglichkeiten. Der X850 Miniflex™ kann individuell mit einem Schalensitz oder einem Stoffsitz ausgestattet werden. Der elektrische Sitzlift kann auch bei diesem Modell optional gewählt werden.



ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



FARBEN

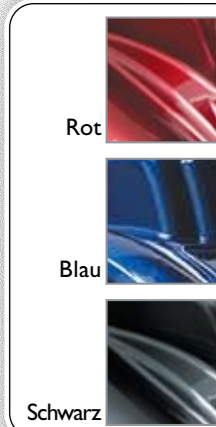

Manuell verstellbare Rückenlehne



Individuelle, robuste Federung



Einstellbare Achsabstand, der spezifisch auf die für Sie passende Rollstuhllänge angepasst wird



Aktive Kurvenbeleuchtung



Gefederte Spiegel, die nicht an Hindernissen hängen bleiben.



Transportösen



Stabile Stoßdämpfer



Abschließbares Bedienpult



Leicht abzunehmender Gepäckkoffer



Die Option auf einen elektrischen Sitzlift ist bei allen Modellen gegeben.



Elektrische oder manuelle Sitzschwenkung um 180°.



Für den Corpus Sitz sind elektrisch verstellbare Rückenlehnen erhältlich.



Wenn Sie sich besonders sicher fühlen möchten wenn Ihr Kind unterwegs ist, ist der Überrollbügel eine gute Wahl.