

permobil

THE POWER OF MOBILITY



Auf Tour.

Extra niedrige Sitzhöhe



Das Untergestell des **C500S Corpus 3G Lowrider** wurde speziell für In- und Outdoor-Aktivitäten entwickelt. Der C500 hat die Fahrgestellstärke, die Sie im Freien brauchen, aber ist zugleich hinreichend vielseitig in Innenbereichen. Wir haben das Untergestell mit unserem beliebten Corpus 3G-Sitz kombiniert. Der Sitz verfügt über alle wichtigen Funktionen, die Sie für langes Sitzen brauchen. Sie sitzen bequem auf dem anatomisch geformten Sitzpolster, das Ihnen eine optimale Unterstützung bietet. Daneben stehen Ihnen elektrische Funktionen wie die Neigungs- und Liegeposition zur Druckentlastung zur Verfügung. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Vorwärtsneigung von 5° als zusätzliche Hilfe während des Transfers auszuwählen. Der besondere Vorteil des Lowriders ist seine extra niedrige Sitzhöhe, sodass er ausgesprochen gut für den Gebrauch in Fahrzeugen geeignet ist.

C500
CORPUS 3G
LOWRIDER

Elektrische Funktionen





Rückenlehne

Standard geteilte Rückenlehne. Wählen Sie eine niedrige Rückenlehne für aktiveres Sitzen.




Ergonomischer Sitz

Anatomisch geformtes Sitzkissen für zusätzliche Unterstützung. Der Sitz ist außerdem mit seitlich schwenkbaren Armstützen ausgestattet.



Sitzposition


Die elektrische Neigungs- und Liegeposition bietet maximalen Komfort und Druckentlastung. Wählen Sie die Vorwärtsneigung von 5° als zusätzliche Hilfe beim Ein- und Ausstieg.

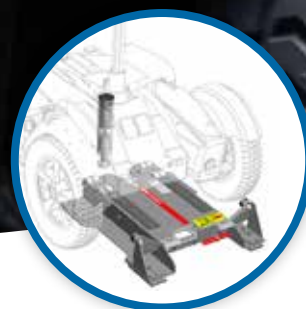


Permolock C

Crash getestet mit Permolock C Verriegelung. Sie können Auto fahren, während Sie im Rollstuhl sitzen.


Farben

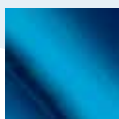


cobalt blue

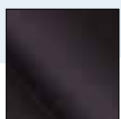

onyx black

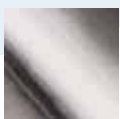

phantom grey

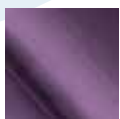

deep purple



volcano red




platinum silver

Bezug



Kunstleder

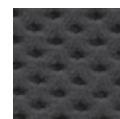

Stoff

Technische Daten

Gesamtlänge	1225 mm
Gesamtbreite	675 mm
Mindesttransportlänge	930 mm
Sitzhöhe	405 mm
Sitzhöhe mit elektrischer Verstellung	405 – 545 mm
Gesamtgewicht inkl. Batterien	149 kg
Max. Benutzergewicht	136 kg
Sitzbreite	420 – 570 mm (in 50 mm-Schritten)
Sitztiefe	370 – 570 mm (in 25 mm-Schritten)
Breite der Rückenlehne	360 – 410 – 460 – 510 mm
Höhe der Rückenlehne	470, 545 – 670 mm (in 25 mm-Schritten)
Armlehnenhöhe	230 – 330 mm
Verstellbarer Rückenlehnenwinkel	85° - 170°
Verstellbarer Beinstützenwinkel	85° - 170°

Batterieleistung	2 x 73 Ah
Reichweite (ISO 7176-4)	30 - 40 km
Höchstgeschwindigkeit	8 - 10 km/h
Wendekreis (ISO 7176-5)	715 mm
Hindernishöhe	60 - 80 mm
Federung	ja
Elektronik	R-net
Elektrische Sitzhöhenverstellung	ja, 140 mm
Elektrische Sitzneigung	Option, 0° -30° oder -5° -25°
Elektrisch verstellbare Beinstützen	Option
Elektrische Rückenlehnenverstellung	Option
Garantie	2 Jahre
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - crash getestet
EN12182/EN12184 CE	ja