




MAGNIFIEK IN ZIJN EENVOUD

Het gestroomlijnde design en krachtige vermogen dat u verwacht van Permobil's hoogwaardige elektrische rolstoelen vindt u terug in de C300 TS. Geen enkel andere elektrische rolstoel van deze categorie biedt de perfecte combinatie van stabiliteit, zitcomfort en wendbaarheid tegen de beste totaalprijs. Dankzij Permobil's passie voor engineering geniet u van een grote keuze aan zitsystemen. Het TS-zitsysteem wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en instelbaarheid. Dankzij het geïntegreerde unitrack profiel in het duurzaam buisvormige materiaal, kunt u onder andere de zitdiepte, armleggerhoogte en positie van de rompelotten eenvoudig en snel aanpassen. Ook de standaard lage zithoogte van 51 cm zorgen voor een optimale functionaliteit. Optioneel zijn er 4 elektrische verstellingen beschikbaar, zoals zitlift, kantel-, rug- en beenhoek verstelling. Ook is de TS zitting in verschillende zithoogtes en zithoeken in te stellen. De mogelijkheden zijn ongeëvenaard – er zijn 3 soorten beensteunen beschikbaar, de armsteunen kunnen zowel omhoog als in hoek ingesteld worden. Er zijn eveneens verschillende positionerings accessoires, zoals dijbeensteunen, rompsteunen, kuitsteunen en hoofdsteen beschikbaar om de gebruiker optimaal te ondersteunen.

C300 TS



FRAMEKLEUREN

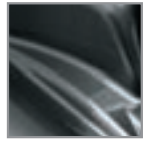

Zwart



Zilver metallic



VR-2 elektronica met uitbreiding voor 4 verstellingen via de joystick.


ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN




ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Deelbare velgen met wiel-doppen in dezelfde kleur als bekapping mogelijk.

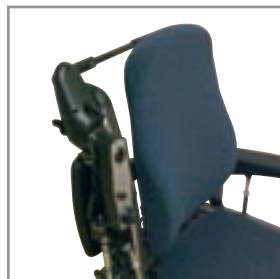

Armlegger opklapbaar, verstelbaar.

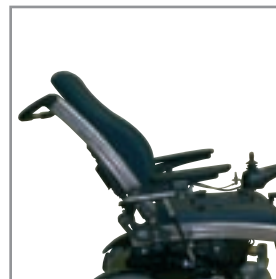

Elektrische rugverstelling



Elektrische zitlift

SPECIFICATIES

Lengte	108 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 150°
Breedte	62 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	88,5 cm	Actieradius	25 - 35 km
Zithoogte vaste lift	51 cm	Max. snelheid	7 km/uur
Zithoogte met elektrische stoellift	51 - 71 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht incl. accu's	109,7 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	136 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	38 - 43 - 48 - 53 cm	Elektronica	VR-2
Zitdieptes	38 - 55 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	38 - 43 - 48 - 53 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogetes	45 - 60 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	38 - 53 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 125°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland
Tel +31 (0) 45 564 54 80
Fax +31 (0) 45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl

Multi-adapter voor montage van de meest voorkomende zitsystemen, zoals Matrixx.

C300TS062011NL