




FLEXIBILITEIT IS GRENZELOOS

Het gestroomlijnde design en krachtige vermogen dat u verwacht van Permobil's hoogwaardige elektrische rolstoelen vindt u terug in de C350 TS. Geen enkele andere elektrische rolstoel van deze categorie biedt dezelfde combinatie van stabiliteit, zitcomfort en wendbaarheid. Het TS-zitsysteem wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en instelbaarheid. Dankzij het geïntegreerde Unitrack profiel in het duurzaam buisvormige materiaal, kunt u onder andere de zitdiepte, armleggerhoogte en positie van de ondersteuningspelotten eenvoudig en snel aanpassen. Optioneel zijn er vier elektrische verstellingen beschikbaar: zitlift, kantel-, rug- en beenhoek verstelling. De zithoogte blijft ongewijzigd onafhankelijk van de gekozen elektrische verstellingen. Ook is de TS zitting in verschillende zithoogtes en zithoeken in te stellen. De mogelijkheden zijn ongeëvenaard: er zijn twee soorten beensteunen beschikbaar, de armsteunen kunnen zowel omhoog als in hoek ingesteld worden en er zijn verschillende positionerings accessoires, zoals dijbeensteunen, rompsteunen, kuitsteunen en hoofdsteun beschikbaar om de gebruiker optimaal te ondersteunen.

C350
TS



FRAMEKLEUREN

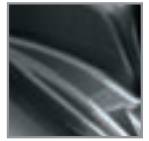

Zwart



Zilver metallic




VR-2 elektronica met uitbreiding voor 4 verstellingen via de joystick.

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Deelbare velgen met wiel-doppen in dezelfde kleur als bekapping mogelijk.

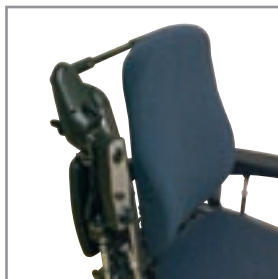

Armlegger opklapbaar, verstelbaar.



Elektrische rugverstelling



Elektrische zitlift

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	106,5 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 150°
Breedte	62,5 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimum transportlengte	90 cm	Actieradius	30 - 35 km
Zithoogte vaste lift	51 cm	Max. snelheid	10 km/uur
Zithoogte met elektrische stoellift	51/71 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	94,5 cm
Gewicht incl. accu's	111,7 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	136 kg	Vering	Ja
Zitbreedte	38/43/48/53 cm	Elektronica	VR-2
Zitdiepte	38 - 55 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedte	38/43/48/53 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogte	45/60 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	38 - 53 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 125°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV

Beitel 11

6466 GZ Kerkrade

Nederland

Tel +31 (0) 45 564 54 80

Fax +31 (0) 45 564 54 81

info@permobil.nl

www.permobil.nl