



X850



The Power of Mobility



X850



X850 CS

X850 Corpus™

X850 Miniflex™

Gebouwd voor buiten.

Onze nieuwste, krachtige off the road-rolstoel, de X850, ziet er niet alleen stoer uit, maar is bovendien geconstrueerd voor degene die hoge prestaties verwacht. Heeft u een stevige rolstoel nodig in de stad of in de natuur? Wellicht woont u een eind van de dichtstbijzijnde winkel vandaan, gaat u met de rolstoel naar het werk of wilt u met vrienden mee met een fietstocht. Dan moet u een rolstoel hebben die dit aankan en waarop u kunt vertrouwen.

Met achterwielaandrijving, een sterke motor en een robuuste vering beschikt u over een rolstoel waarmee u veilig 15 km/u kunt rijden. De zitting van de X850 kan 180° gedraaid worden, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt. Andere noviteiten zijn meesturende verlichting die de rijrichting volgt, de verende spiegels en rubberen bumpers die tegen een stootje kunnen.

Omdat wij vinden dat veiligheid altijd een hoge prioriteit moet zijn, is de X850 uitgerust met ESP (Electronic Steering Performance) die de aandrijfmotor controleert en ervoor zorgt dat u bij het nemen van een bocht de controle niet verliest. De servobesturing met joystick kan geprogrammeerd worden volgens uw wensen.



The Power of Mobility

www.permobil.com

X850 CS

De CS-zitting biedt een comfortabel design met een eenvoudige vorm. De zitting kan in beide richtingen gemakkelijk 90° gedraaid worden, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt. Met een stoellift kunt u met één druk op de knop de zitting 20 cm verhogen. Als u even wilt rusten, kunt u de rugleuning manueel achteruit laten hellen. En om de stoel te transporteren, klapt u de rugleuning omlaag



ELEKTRISCHE BEDIENING



X850 Corpus™

Het Corpus-zitsysteem biedt u een aantal elektrische verstelmogelijkheden. Zo kunt u met het bedieningspaneel eenvoudig de rug- en beensteun aanpassen. Bovendien is een elektrische stoellift mogelijk. Net zoals met de CS-zitting kan de zitting zowel manueel als elektrisch gedraaid worden.



ELEKTRISCHE BEDIENING



De rugleuninghoek is handmatig verstelbaar



Individuele robuuste vering



Verstelbare wielbasis zodat de lengte precies voor u geschikt is en u indien nodig de lengte van de stoel kunt aanpassen.



Meesturende verlichting



Elektrische stoellift mogelijk bij alle stoelkeuzes



Zitting kan 180° draaien, handmatig of elektrisch

X850 Miniflex™

De Miniflex is uitermate geschikt om mee te groeien met uw kind. U heeft de keuze uit drie verschillende zitbreedtes en dieptes en evenveel keuzemogelijkheden wat de hoogte en breedte van de rugleuning betreft. De zitting is perfect voor kinderen tot 35 kg. Kies uit skai of stoffen bekleding. Indien nodig kan de stoel natuurlijk aangepast worden. Als optie is er een stoellift om veel hoger te komen.




ELEKTRISCHE BEDIENING



KLEUREN


Rood

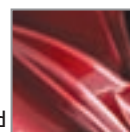

Blauw



Zwart

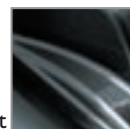

Verende spiegels blijven niet vastzitten in hindernissen



Transportbevestigingen



Stevige bumpers



Bedieningspaneel wordt vergrendeld met sleutel



Bagagebox kan gemakkelijk gedemonteerd worden.



Elektrisch bediende rugleuning mogelijk op Corpus.



Als optie kan er een veiligheidsbeugel gemonteerd worden, zodat u zich geruster voelt wanneer uw kind erop uit trekt.

STANDAARD TECH SPEC.	CORPUS	CS	MINIFLEX
Lengte	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm
Breedte	720 mm	720 mm	720 mm
Min. Transportlengte	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Zithoogte vaste lift	560 mm	550 mm	530 mm
Zithoogte met elektrische stoellift	560 - 760 mm	550 - 750 mm	530 - 730 mm
Gewicht incl. accu's	190 kg	182 kg	163 kg
Max. gewicht gebruiker	136 kg	136 kg	35 kg
Zitbreedte	430 en 480 mm	450 mm	250/300/350 mm
Zitdiepte	310/410/460/510 en 560 mm	430 mm	250/300/350 mm
Rughoogte	535/605 mm	520 mm	325,375 en 425 mm
Rugleuning breedte	340/390 en 440 mm	NVT	250/300 en 350 mm
Armsteunhoogte	verstelbaar	verstelbaar	verstelbaar
Armsteunlengte	250/300/350 en 400 mm	NVT	200 en 250 mm
Afstand tussen armsteunen	350/400 en 450 mm	NVT	250 - 350 mm
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 130° manueel / elektr.	90° - 120° manueel	90° - 165° manueel
Hoek beensteun - verstelbaar	NVT	NVT	90° - 150° manueel
Accucapaciteit	2 x 97 ah	2 x 97 ah	2 x 97 ah
Laadtijd	ca. 11 u.	ca. 11 u.	ca. 11 u.
Actieradius	35 - 45 km	35 - 45 km	35 - 45 km
Max. snelheid	15km/u	15km/u	15km/u
Remweg	3500 mm	3500 mm	3500 mm
Draaistraal 180° (ISO 7176-5)	1680 mm	1680 mm	1680 mm
Vermogen m.b.t. obstakels	110 mm	110 mm	110 mm
Vering	ja	ja	ja
Elektrische Stoellift	ja, 2000 mm	ja, 2000 mm	ja, 2000 mm
Elektrische Kantelverstelling	ja	nee	nee
Elektrische Beensteunverstelling	ja	nee	nee
Elektrische Rugstelling	ja	nee	nee
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Afstand zitting - voetplaat	340 - 560 mm		130 - 340 mm

STANDAARD AANPASINGEN	CORPUS	CS	MINIFLEX
Robuuste verstelbare vering	*	*	*
Individuele vering op voorwielen	*	*	*
Ruime wioldimensies	*	*	*
Stevige rubberse bumpers	*	*	*
Verstelbare asafstand manueel; / elektrisch	optioneel	optioneel	optioneel
Zitting draaibaar in twee richtingen	optioneel	optioneel	optioneel
Electronica die zonder gereedschap of instrumenten geprogrammeerd kan worden in functie van de gebruiker	*	*	*
De zitting bestaat uit modules die eenvoudig vervangen kunnen worden om de zithoogte, breedte en en rughoogte te wijzigen	*		*
Ergonomisch vormgegeven zitting met ingebouwde, verstelbare lenden- en rompsteun.	*		
Kleur chassis	zwart, rood en blauw	zwart, rood en blauw	zwart, rood en blauw
Bekleding	skai of stof	skai	skai of stof

EXTRA FUNCTIES	CORPUS	CS	MINIFLEX
Elektrische stoellift	*	*	*
Elektrische verstelbare asafstand	*	*	*

STANDAARD ASSESOIRES	CORPUS	CS	MINIFLEX
Achteruitkijkspeigel	*	*	*
Bagagebox	*	*	*
Bagagemand	*	*	*
Boog			*
Kruk/stok houder	*	*	*
Verstelbare neksteun	*	*	*
Dijensteun	*		*
Rompsteun	*		*
Neksteun	instelbaar	*	instelbaar
Vierpuntgordel	*		*
Gordel met knipslot	*		*
Zelfafstellende gordel	*	*	*
Zelfafstellende gordel, lang	*	*	
Armsteuntas	*	*	*
Accu	*	*	*
Lader	*	*	*



The Power of Mobility

www.permobil.nl

X850062011NL