

permobil

M3 CORPUS®



**UW VERTROUWDE
HULPMIDDEL**

M3 CORPUS® – UW VERTROUWDE HULPMIDDEL.

Een geweldige combinatie uit onderstel en stoel

De M3 Corpus volgt de natuurlijke beweging van uw lichaam en zorgt zodoende voor een stabiele en comfortabele rijvering, zodat u langer kunt zitten, verder kunt reiken en in het algemeen meer kunt doen dan u gewend bent.

De M3 Corpus zet een kwaliteitsstandaard in elektrische middenwielaandrijving stoelen. De combinatie van superieure **Smooth** vering, stuurgemak en zitting biedt u een complete oplossing voor al uw mobiliteitsproblemen.

Het Corpus zitsysteem kan volledig aangepast worden en reduceert (bewezen) de risico's op drukwonden bij gebruikers.

Met de mogelijkheid van maar liefst vijf elektrische zitfuncties, gecombineerd met programmeerbaar stoelgeheugen, is uw comfort en welzijn verzekerd. Wij bieden een breed assortiment aan lichaamsondersteuning en andere accessoires, ontwikkeld om de tijd, die u ontspannen in uw stoel zit en meer uit uw dag kunt halen, te vergroten.

Onze nieuwste joystick heeft ingebouwde BLUETOOTH® en infraroodtechnologie, waardoor u kunt verbinden met uw mobiele telefoon, tablet of PC en zelfs uw thuisomgeving kunt aansturen*, bijvoorbeeld het bedienen van de TV of het aan- en uitzetten van de verlichting.

*Voor aansturing is mogelijk extra apparatuur nodig, deze wordt niet geleverd door Permobil.

KENMERKEN



Smooth vering

Smooth vering verschaft superieur comfort, stabiliteit en grip op hellingen en bij obstakels, binnen en buiten. Simpel en robuust design met weinig onderdelen is betrouwbaar en makkelijk te onderhouden.



Active Height

Rijden tot 5 km per uur, terwijl de stoel volledig verhoogd is, met volledige veerfunctionaliteit. Participatie gedurende de gehele dag.

Active Reach

Tot 20° voorwaarts kantelen, kan zelfs gebruikt worden, wanneer de stoel volledig verhoogd is, zodat u meer van wereld kunt bereiken.*

*Meer dan 10° vereist extra ondersteuning

VOORDELEN

De M3 Corpus – revolutioneert de elektrische rolstoel – opnieuw

Al 50 jaar is Permobil koploper op het gebied van elektrische rolstoel technologie. En met onze M-Serie, hebben we opnieuw bedacht wat een middenwielaandrijving stoel kan.

Met de M3 Corpus verzekeren wij ons, dat we de sterkste oplossing voor onze klanten bieden. Wij begrijpen, dat het belangrijk is, dat rijden comfortabel en intuïtief is en dat stoelen geprogrammeerd moeten kunnen worden naar de behoeften van de gebruiker.

Het niveau aan stabiliteit is ongekend door de combinatie van slim design, fijn afgestelde vering en driepunt stoelbevestiging.

De stabiliteit maakt het mogelijk om de zitting verder naar voren te plaatsen, waardoor u intuïtief rijdt en onafhankelijk bent.

Het zitsysteem ondersteunt het lichaam op ergonomische wijze en verzekert een comfortabele zitbeleving.

U kunt de stoel voor- en achterwaarts kantelen om zowel een comfortabele en ontspannen houding te geven, als een klinisch correcte ontlasting van uw lichaam te verzekeren en zo het risico op doorligverwondingen te verminderen.

ACCESSORIES

Zitten en positioneren ROHO® kussens

- » QUADTRO SELECT®
- » CONTOUR SELECT®
- » HYBRID ELITE®
- » ERGO AIR®

Permobil Original Supports

- » Hoofdsteunen
- » Zijsteunen
- » Dijsteunen
- » Kuitsteunen
- » Heupsteunen
- » Amputatiesteun

Alternatieve stuurinrichtingen en Joystick connectiviteit

- » Bluetooth muis – bedient tot 2 apparaten (bijv. PC en tablet)
- » Infra-rood biedt u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw omgeving en deze te bedienen
- » Diverse speciale besturingen: Mini-joystick, ckinbesturing, begeleiders besturing, etc.

Houders en dragers

- » Smartphone & Tablet houders
- » Horizontaal-blijvende bekerhouder
- » Armsteun tasje
- » Medische benodigdheden tasje
- » Kruk houder
- » Zuurstoffles houder
- » Drager voor benodigdheden

Biomechanische rugsteun.

Een groot voordeel van de Corpus zitting is de opvallend goede biomechanische rugsteun beweging. Draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van scheef zitten en verzekert een correcte positieverandering zodat je lichaam optimaal kan ontspannen.

Corpus® Zitsysteem.

Biedt een reeks van elektrische zitfuncties met talloze klinische voordelen.

Verbindingsmogelijkheden.

Bluetooth en infraroodtechnologie ingebouwd in de joysticks, zodat de gebruikers tot 2 Pc's of tablets kunnen aansturen en daarnaast verbinding kunnen leggen met hun thuistelesfoon of TV- en zelfs de lichten thuis aan en uit kunnen zetten.

Active Height-verhoging.

Nooit meer gesprekken missen. Volledig verhoogd rijden tot 5 km per uur met volledige veer-functionaliteit. In deze instelling, momenteel de snelste middenwielaandrijving stoel op de markt.

Geheugenfuncties faciliteren herhaalbare, druk-verlichtende posities en een onafhankelijke herpositionerings-modus. (IRM).

Een ongeëvenaard niveau aan stabiliteit.

Simpel en robuust design geeft een vergroot vertrouwen.

Topsnelheid

is 10 km/uur.

Personaliseer de stoel

met uw favoriete kleur.

**Smooth** vering zorgt voor comfortabel rijden.

6 wielen zijn continu in contact met het oppervlak en geven zo tractie tijdens het rijden.

Het anti-wapperdesign verzekert strak sturen en stabiele, rechtlijnige rijdprestaties.



SPECIFICATIES

Lengte incl. zitsysteem	1080 mm
Breedte chassis	615 mm
Breedte incl. zitsysteem	615–790 mm
Hoogte	960–1170 mm
Min. transportlengte	795–855 mm
Min. transporthoogte	823 mm
Zithoogte	450 mm
Zithoogte met elektrische zitlift	450–750 mm
Gewicht incl. accu's 60/73 Ah	175 kg/183 kg
Gewicht van accu's 60/73 Ah	2x19 kg/2x 23 kg
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Zitbreedte	420–570 mm (bij 50 mm)
Zitdiepte	370–570 mm (bij 25 mm)
Breedte rugleuning	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545–670 mm (bij 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm
Hoogte armleuningen	185–320 mm
Actieradius (ISO 7176-4)	25 km/30 km*
Max. snelheid	10 km/h

Draaicirkel (ISO 7176-5)	560 mm
Omkeren in gangen	1110 mm
Obstakelhoogte	50/90 mm
Ophanging	Ja
Electronica R-net	120 A
Elektrische zitlift	0–300 mm
Elektr. kantelverstelling (achterwaarts)	50°
Elektr. kantelverstelling (voorwaarts)	0–10° (standaard beensteun) 0–20° (VS beensteun)
Elektr. hoek beensteun – verstelbaar	90–180° (standaard voetplaat)
Elektr. hoek rugleuning – verstelbaar	85–150°, 85–180°
Manuëll hoek rugleuning – verstelbaar	90–135°
Garantie	2 jaar
ISO 7176-19/ISO 10542-3	Ja - crashtest
EN12182/EN12184 CE	Ja

*het bereik kan kleiner zijn bij veelvuldig gebruik op bijvoorbeeld hellingen

ELEKTRISCHE FUNCTIES



Kantelverstelling
(voorwaarts)



Kantelverstelling
(achterwaarts)



Zitlift



Hoek beensteun
– verstelbaar



Hoek rugleuning
– verstelbaar

KLEUREN



SUNBURST ORANGE



RADIANT RED



POWER PINK



OCEAN BLUE



GALACTIC GREEN




MIDNIGHT BLACK

BEKLEDING



SKAI

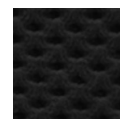

STOF

Deze specificaties zijn afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Zie voor verdere, hier niet vermelde informatie de gebruikershandleiding die van de website van Permobil kan worden gedownload of neem contact op met de Permobil-vestiging bij u in de buurt.

permobil

Permobil Benelux | Brandenburgerstrasse 2-4 | DE-40880 Ratingen | T. +31 (0) 707 70 37 64
info@permobil.nl | www.permobil.com