

permobil

THE POWER OF MOBILITY



Onderweg zijn.

Extra lage zithoogte



De **C500 Corpus 3G Lowrider** is speciaal gemaakt om actief te zijn. Het C500-chassis heeft de sterkte die u nodig hebt voor gebruik buitenshuis, maar tegelijkertijd is het voldoende flexibel binnenshuis. We hebben het chassis gecombineerd met onze populaire Corpus 3G-zitting. De zitting beschikt over alle belangrijke eigenschappen die u nodig hebt om langdurig te kunnen zitten. U zit comfortabel met de correcte ondersteuning in het ergonomische zitkussen en u kunt elektrische functies gebruiken, zoals een kantelverstelling en rugverstelling voor het verlichten van druk. U kunt ook kiezen voor een voorwaartse kanteling van 5° voor extra hulp tijdens het overstappen. Het speciale voordeel van de Lowrider is een extra lage zithoogte, waardoor hij bijzonder geschikt is voor gebruik in auto's.

C500
CORPUS 3G
LOWRIDER

elektrische verstellingen





Rugleuning

Standaard gedeelde rugleuning. Kies de lage rugleuning voor een actievere zithouding.




Ergonomische zitting

Zitkussen met contouren voor extra ondersteuning. De zitting beschikt over verstelbare armsteunen en een lengte compenserende beensteun.



Zitverstelling


Elektrisch kantel- en rugverstelling helpen om een maximaal comfort en drukverlichting te bereiken. Kies voor de voorwaartse kanteling van 5° voor een beetje extra hulp tijdens de transfer.

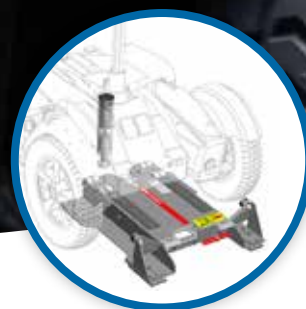


Permoblock C

Crash-getest met Permoblock C rolstoelvergrendeling. U kunt uw auto besturen, terwijl u in de rolstoel zit.


Kleuren

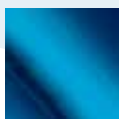


cobalt blue

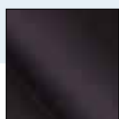

onyx black

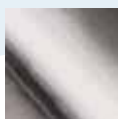

phantom grey

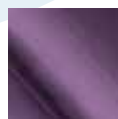

deep purple



volcano red




platinum silver

Bekleding



skai

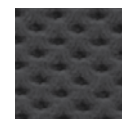

stof

Specificaties

Totale lengte	1225 mm
Totale breedte	675 mm
Min. transportlengte	930 mm
Zithoogte	405 mm
Zithoogte met elektrische stoellift	405 – 545 mm
Totaal gewicht incl. accu's	149 kg
Max. gewicht gebruiker	150 kg (136 kg met elektrische stoellift)
Zitbreedte	420 - 570 mm (met 50 mm)
Zitdiepte	370 - 570 mm (met 25 mm)
Breedte rugsteun	360 - 410 - 460 - 510 mm
Hoogte rugsteun	470, 545 - 670 mm (met 25 mm)
Hoogte armsteun	230 – 330 mm
Hoek rugleuning - verstelbaar	85° - 170°
Hoek beensteun - verstelbaar	85° - 170°

Accuvermogen	2 x 73 Ah
Actieradius (ISO 7176-4)	30 - 40 km
Max. snelheid	8 - 10 km/uur
Draaicirkel (ISO 7176-5)	715 mm
Hoogte m.b.t. obstakels	60 – 80 mm
Vering	ja
Elektronica	R-net
Elektrische stoellift	optie, 140 mm
Elektrische kantelverstelling	optie, 0° - 30° of - 5° - 25°
Elektrische beensteunverstelling	optie
Elektrische rugverstelling	optie
Garantie	2 jaar
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - crash tested
EN12182/EN12184 CE	ja