



F5 *Corpus*



De combistoel van nu en in de toekomst

Comfort, prestaties en stabiliteit.

De F5 Corpus is een duurzame, sterke en stabiele rolstoel met voorwielaandrijving, met bovendien het beste zitsysteem op de markt: de Corpus-zitting. Het zitsysteem is zodanig ontworpen dat het de klinische, functionele en lifestyle-behoefte van actieve gebruikers op doeltreffende wijze ondersteunt. De laatste versie van de Corpus biedt vijf mogelijke elektrische zitverstellingen. Het is nu standaard mogelijk om de zitunit, naar voren toe, negatief te kantelen. Dit maakt actief zitten en een makkelijker transfer mogelijk.

Bij het ontwikkelen van het F5-chassis hebben we veel nadruk gelegd op de stabiliteit en rijcomfort. In combinatie met sterke motoren zorgt dit voor uitstekende prestaties en een stabiele, vertrouwenwekkende ervaring. Er is een reeks van alternatieve bedieningsmogelijkheden voor rolstoelrijders die geen joystick gebruiken.

Voor transportdoeleinden kan het bovenste deel van de rugleuning worden verwijderd om de totale afmetingen van de rolstoel te reduceren.

permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektrische functies





Comfort Ride™

De volledig onafhankelijke ophanging in een subtiel afgestemd motor-/aandrijfgedeelte zorgt voor een hoger niveau van comfort en stabiliteit, zowel binnen als buiten. Zo spaart u uw energie voor de belangrijke dingen in het leven.

Prestaties

Sterke nieuwe motoren, gecombineerd met voorwielaandrijving en ESP (Enhanced Steering Performance) bieden u snelheid en bewegingsvrijheid. U bepaalt zelf waar u naar toe rijdt.

Onafhankelijkheid

Doordat de AP-zitlift gebruikers 35 cm omhoog kan brengen, biedt deze u een ongeëvenaarde functionele onafhankelijkheid en kunt u overal bij.

Bediening

Het nieuwste besturingssysteem voor rijden en het positioneren van de zitting. LCD-kleuren-scherm met geheugenfuncties, snelheidsmeter en klok.

Kleuren



sunburst orange

radiant red

power pink

ocean blue


titan blue

galactic green

phantom grey

midnight black

Bekleding

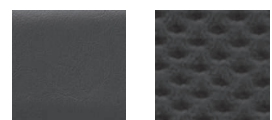

leatherette

black fabric

Specificaties

Lengte	1140 mm
Breedte	655-790 mm
Hoogte	960-1170 mm
Min. transportlengte	825/930 mm
Min. transporthoogte	825 mm
Zithoogte	450 mm
Zithoogte met elektrische zitlift	450-800 mm
Gewicht incl. accu's	186 kg
Gewicht van accu's	2x23 kg
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Zitbreedte	420-570 mm (per 50 mm)
Zitdiepte	370-570 mm (per 25 mm)
Breedte rugleuning	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (per 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380-480/480-580 mm
Hoek rugleuning – verstelbaar	120°(handmatig), 150° & 180°(elektrisch)
Hoogte armleuningen	185-320 mm

Deze specificaties zijn afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Zie voor verdere, hier niet vermelde informatie de gebruikershandleiding die van de website van Permobil kan worden gedownload of neem contact op met de Permobil-vestiging bij u in de buurt.

*Het bereik kan kleiner zijn als de rolstoel veelvuldig wordt gebruikt op hellingen, oneffen terrein of om tegen stoepranden op te rijden.

Hoek beensteun – verstelbaar	90°-180°
Accucapaciteit	2 x 73 AH
Actieradius	25-35 km*
Max. snelheid	12 km/u
Draaicirkel (ISO 7176-5)	1525 mm
Omkeren in gangen	1140 mm
Obstakelhoogte	70-100 mm
Ophanging	Ja
Electronica R-net	120A
Elektrische zitlift	Ja
Elektrische kantelverstelling (achterwaarts)	50°
Elektrische kantelverstelling (voorwaarts)**	10°/20°/45°
Elektrische beensteunverstelling	Ja
Elektrische rugverstelling	Ja
Garantie	2 jaar
ISO 7176-19/ISO 10542-3	Ja – crashtest
EN12182/EN12184 CE	Ja

**Extra veiligheidsmaatregelen kunnen nodig zijn.

www.permobil.com

F5CORPUS.20150110.NL

permobil

THE POWER OF MOBILITY