



F5 Corpus VS



permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektrische functies

Kom overeind.

Stabiliteit, comfort en prestaties.

De **F5 Corpus VS** is een duurzame, sterke en stabiele rolstoel met voorwielaandrijving én bovendien het beste zitsysteem op de markt: de Corpus-zitting. Het zitsysteem is zodanig ontworpen dat het de klinische, functionele en lifestyle-behoefte van actieve gebruikers op doeltreffende wijze ondersteunt.

De nieuwste versie van de Vertical Stander (VS) biedt alle elektrische zitverstellingen van de Corpus-zitting plus een innovatieve nieuwe manier van staan. Daardoor kunt u kiezen uit twee posities, Zit-naar-Staan of Lig-naar-Staan.

De F5 Corpus VS heeft een volledig onafhankelijke ophanging en automatische, zelfregelende steunwielen, die voor een nieuw niveau van comfort en stabiliteit zorgen, vooral als u – binnen of buiten – staande rijdt! En dat geeft u een grotere onafhankelijkheid en vrijheid. Er is een reeks van alternatieve besturingsunits voor rolstoelrijders die geen joystick gebruiken.

Voor transportdoeleinden kan het bovenste deel van de rugleuning worden verwijderd om de totale afmetingen van de rolstoel te reduceren.





Staande rijden

Kies uit Zit-naar-Staan of Lig-naar-Staan of neem ze allebei! Staande rijden is ook in elke staande hoek gemakkelijker geworden.

Comfort

Alle voordelen van het ergonomisch ontworpen Corpus-zitsysteem zijn nu verkrijgbaar voor de Corpus VS.

Stabiliteit

Elektrische, zelfstellende steunwielen voor stabiliteit tijdens het staan en het veilig passeren van obstakels tijdens het staande rijden.

Bediening

Het nieuwste besturingssysteem voor rijden en het positioneren van de zitting. LCD-kleurenscherm met geheugenfuncties, snelheidsmeter en klok.

Kleuren



sunburst orange

radiant red

power pink

ocean blue


titan blue

galactic green

phantom grey

midnight black

Bekleding

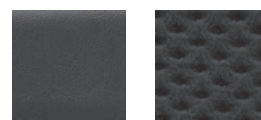

leatherette

black fabric

Specificaties

Lengte	1145 mm
Breedte	655–790 mm
Hoogte	960–1170 mm
Min. transportlengte	980 mm
Min. transporthoogte	825 mm
Zithoogte	450 mm
Zithoogte met elektrische zitlift	450–800 mm
Gewicht incl. accu's	196 kg
Gewicht van accu's	2x23 kg
Max. gebruikersgewicht 'Zit-naar-Staan' (max. 80°)	136 kg
Max. gebruikersgewicht 'Lig-naar-Staan' (max. 80°)	110 kg
Zitbreedte	420–570 mm (per 50 mm)
Zitdiepte	370–570 mm (per 50 mm)
Breedte rugleuning	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	595/620/645/670 mm
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm
Hoek rugleuning – verstelbaar	180°
Hoogte armleuningen	215–330 mm

Deze specificaties zijn afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Zie voor verdere, hier niet vermelde informatie de gebruikershandleiding die van de website van Permobil kan worden gedownload of neem contact op met de Permobil-vestiging bij u in de buurt.

*Het bereik kan kleiner zijn als de rolstoel veelvuldig wordt gebruikt op hellingen, oneffen terrein of om legen stoepranden op te rijden.

Hoek beensteun – verstelbaar	90°–180°
Accucapaciteit	2 x 73 AH
Actieradius	25–35 km*
Max. snelheid	12 km/u
Draaicirkel (ISO 7176-5)	1525 mm
Omkeren in gangen	1140 mm
Obstakel hoogte 70–100 mm	
Ophanging	Ja
Electronica R-net	120A
Elektrische zitlift	Ja
Elektrische kantelverstelling	50°
Elektrische beensteunverstelling	Ja
Elektrische rugverstelling	Ja
Elektrische sta-op verstelling	Ja
Garantie	2 jaar
ISO 7176-19/ISO 10542-3	Ja – crashtest
EN12182/EN12184 CE	Ja

www.permobil.com

F5CORPUSVS.20150110.NL

permobil

THE POWER OF MOBILITY