

permobil

THE POWER OF MOBILITY



CRASH TESTED
2 GARANTIE

Dynamiek door ontwerp.

Ultieme techniek en ergonomie

De **C350 Corpus 3G** heeft elektrische achterwielaandrijving en een maximumsnelheid van 10 km/uur en kan uw drukke leven makkelijk bijhouden. Bovendien is het Corpus 3G-zitsysteem ontworpen om een ongeëvenaard comfortniveau te bieden, dat u wel kunt gebruiken in de snelle wereld van vandaag. Het zitsysteem volgt de contouren van het lichaam, biedt oneindige instellingsmogelijkheden voor maatwerk en een een rughoekverstelling van 150°. De armleuningen bevatten ingebouwde kabelgoten, waardoor er minder rommelige bedrading zichtbaar is, terwijl de beensteun gebogen is voor een betere ondersteuning. Door het samengaan van vorm en functionaliteit is de C350 Corpus 3G de ideale blauwdruk voor mobiliteit.



C350

CORPUS 3G

elektrische functies





Kantelverstelling

Maximaal 50° elektrische kanteling met twee bereikselecties voor de ideale herpositionering.

Vering

Onafhankelijke vering voor ultiem rijgenot.


Rughoekverstelling

Maximaal 150° elektrische verstelling mogelijk voor precies het goede comfortniveau.

Armsteunen

Onafhankelijk instelbare armsteunhoogte en -hoek, met makkelijke opklapfunctie.

Kleuren

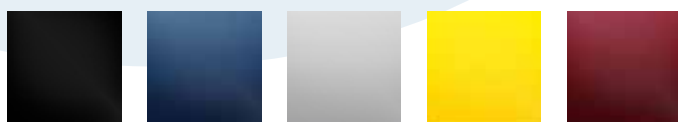

onyx black


dark blue
metallic

platinum silver

xtreme yellow

red metallic

Bekleding

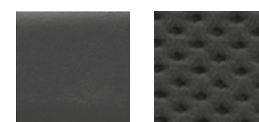

skai

stof

Specificaties

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Totale lengte | 1180 mm |
| Totale breedte | 625 mm |
| Minimale transportlengte | 955 mm |
| Zithoogte | 450 mm |
| Zithoogte met elektrische lift | 450 - 650 mm |
| Totaalgewicht incl. accu's | 149 kg |
| Maximaal gebruikersgewicht | 136 kg |
| Zitbreedte | 420 - 570 mm (per 50 mm) |
| Zitdiepte | 370 - 570 mm (per 25 mm) |
| Rugbreedte | 360 - 410 - 460 - 510 mm |
| Rughoogte | 470, 545 - 670 mm |
| Hoek rugleuning | verstelbaar, 85° - 150° |
| Hoek beensteun | verstelbaar, 85° - 170° |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Accucapaciteit | 2 x 60 Ah |
| Actieradius (ISO 7176-4) | 30 - 35 km |
| Maximumsnelheid | 10 km/uur |
| Draaicirkel (ISO 7176-5) | 665 mm |
| Obstakelhoogte | 70 mm |
| Vering | ja |
| Elektronica | R-net |
| Elektrische zitlift | optie, 200 mm |
| Elektrische kantelverstelling | optie, 0° - 50° of -5° - 45° |
| Elektrische beensteunverstelling | optie |
| Elektrische rugverstelling | optie |
| ISO 7176-19 | ja - crash tested |
| EN12182/EN12184 CE | ja |