



Permobil Indragare



PERMOBIL INDRAGARE

Permobil Indragare är en kompakt winsch som tar minimalt med utrymme i bilen. Hjälper dig att utan kraft komma in och ut ur bilen via ramp. Winschens band med bälteshona fästes enkelt med ett snabbfäste på rullstolen.


Kan manövreras via knapp, handkontroll eller fjärrkontroll.

FUNKTIONER

- Elektrisk in och utdragningsfunktion
- Låsfunktion vid stopp
- Frigöringsfunktion för att lätt kunna dra ut remmen

TILLBEHÖR

- Fjärrkontroll
- Snabbinfästning (lätt demonterbar)

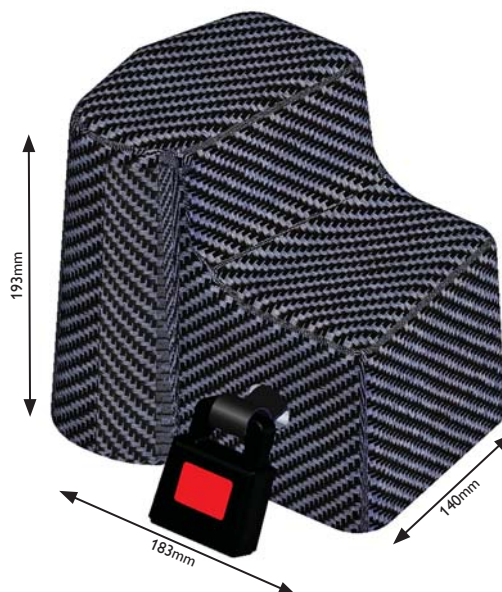

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bandlängd	4 m
Dragkraft	500 N (motsvarar indragning av person i rullstol med totalvikt 140kg vid 15° ramplutning).
Strömförbrukning	max 22 A
Drivning	12 V
Färg	grå/svart, kolfiberlook
Vikt	4 kg



The Art of Mobility™

Box 120, 861 23 Timrå
Tel: +46(0)60-595900

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel: +46(0)8-7477840

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd
Tel: +46(0)36-371799

Industrig. 22, 504 62 Borås
Tel: +46(0)33-131634

www.permobil.se