





PERMOLOCK C


- Passar Permobil C400 och C500.
- Säkert sittande i bil.
- Enkel installation
- Har du ett av våra tidigare lås passar Permlock C i samma hålbild.
- Uppfyller de mätbara kraven i ISO-10542 och ISO-7176-19.
- Kan monteras på förarplats eller på passagerarsida.
- Elektrisk och manuell nödfrigöring

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd	550 mm
Bredd	425 mm
Höjd	83 mm
Vikt.	13,5 kg
Spänning Permlock	12V / Bil
Spänning låsdon	24V / Rullstol

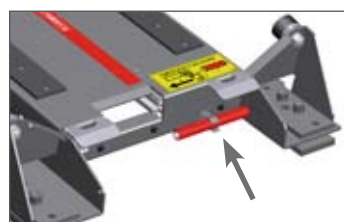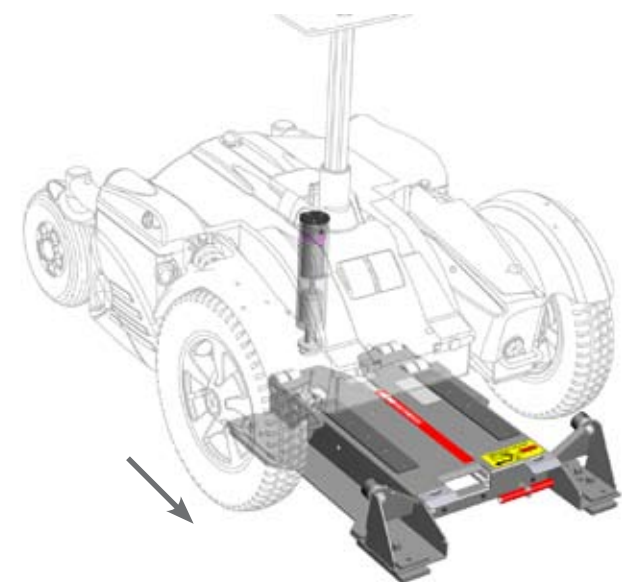


Handtag för manuell frigöring i nödsituation.

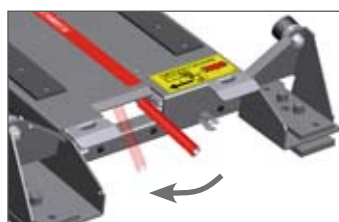

Montera handtaget, pressa åt vänster och backa ut rullstolen ur Permlock C.

TILLBEHÖR

- Monteringsdistans
- Frigöringshandtag
- Snabbfäste frigöringshandtag
- Snabbförankringssats
- Stolsunderrede
- Monteringsplåt

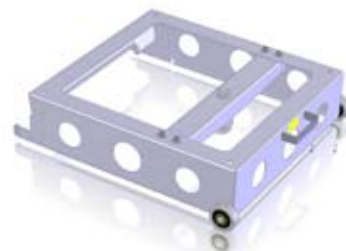

Stolsunderrede gör det möjligt att använda en originalbilstol i låset.



The Art of Mobility™

Box 120, 861 23 Timrå
Tel: +46(0)60-595900

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel: +46(0)8-7477840

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd
Tel: +46(0)36-371799

Industrig. 22, 504 62 Borås
Tel: +46(0)33-131634

www.permobil.se