



The Art of Mobility



Just You

Voor jou... dé oplossing







Basisconfiguratie

- Chassis met Corpus-zitting, kussens, armsteunen en standaard beensteun
- Accu's en acculader
- Verlichting
- Elektrische zitlift
- Elektrische kantelverstelling
- Elektrische rugverstelling
- Elektrische beensteunen

De volgende onderdelen kunnen als nodig in de standaard huurprijs meegeleverd worden:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| • Zitstabilisator | • Rompelotten | • Heupsteunen |
| • Transferhendels | • Taxi adapter | • Kuitsteunen |
| • Gordel | • Duwhandgrepen | • Dijbeensteunen |
| • Armleggeverstevigingsset | • Hoofdsteun | |

Snel een comfortabele stoel, voor binnen en buiten

Onze elektrische rolstoelen geven vrijheid.

Daarmee bedoelen wij dat een rolstoel meer is dan een stoel met een motor. De transportfunctie spreekt voor zich, maar de rolstoel moet ook op vele manieren een bijdrage leveren aan het dagelijks leven.



Een elektrische rolstoel moet ervoor zorgen dat het leven zo normaal mogelijk verloopt. Daarom maken wij rolstoelen en accessoires met uitzonderlijk veel mogelijkheden die oplossingen bieden voor verschillende handicaps. Elke rolstoel is geheel aangepast aan de gebruiker, omdat ieder mens uniek is. De mogelijkheid om een rolstoel in-

dividueel te kunnen aanpassen en veranderen is met name van belang bij mensen met een progressief ziektebeeld. Dankzij het unieke aanpassingsvermogen van onze rolstoelen, kunnen wij onze gebruikers gedurende een lange periode van dienst zijn. Om bovengenoemde groep hun onafhankelijkheid en mobiliteit te laten behouden, komt Permobil met het **Just You** pakket. Het pakket bestaat uit een compleet uitgeruste rolstoel naar keuze, die snel geleverd wordt en op maat gemaakt is volgens de wensen en eisen van de gebruiker. Daarnaast



Als het leven een combinatie van binnen en buiten is, is de C400/C500 een comfortabele en praktische oplossing.



biedt Permobil een volledig pakket om de rolstoel snel en eenvoudig uit te breiden met modules voor alternatieve besturingen en communicatie & omgevingsbesturingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het innovatieve “plug-and-play” systeem en kan op ieder willekeurig tijdstip aangesloten worden. De rolstoel is standaard al voorbereid voor alternatieve besturingsmogelijkheden. Uiteraard blijven de individuele aanpassingen nog altijd mogelijk met het pakket. Permobil **Just You** biedt u een totaal pakket waardoor u op één plaats alle benodigde kennis en producten ter beschikking heeft.

Een stoel om in te rusten.

Een grens

Eén van de vele manieren om te sturen.

Omdat geen mens gelijk is, is de zitting van een Corpus ook nooit gelijk.

Al naargelang de behoefte kan deze op een aantal manieren worden aangepast: in breedte, diepte, hoogte en toebehoren.



Makkelijk te vervangen accu's.



R-Net op C400 en C500

verleggende stoel

TWEE WOORDEN.

MENSELIJKE TECHNIEK.

Dat is wat deze stoel kenmerkt. Met andere woorden, een aantal ingenieuze technische oplossingen met als enig oogmerk het nut voor de gebruiker. Variërend van de alternatieve besturingssystemen tot alle details die de zitting van de Corpus samen zo bijzonder maken. Aangezien we uitgaan van modules, is het mogelijk om innovatieve technieken te gebruiken, die anders veel

te kostbaar geweest zouden zijn.

Het resultaat is een zeer comfortabele en veilige stoel. Dat komt voor een belangrijk deel door het volledig geveerde chassis.

Om nog soepeler te kunnen rijden, is het achterste deel van de stoel voorzien van rubberdempers. De kanteling kan elektrisch worden versteld in een hoek van maximaal 30 graden, wat betekent dat de druk op het zitvlak helemaal verdwijnt. Het kunnen verdelen van de

druk en het van houding kunnen veranderen zijn een must om lang te kunnen zitten en in een stoel actief te kunnen zijn.

Ook de rugleuning en de beensteunen kunnen elektrisch worden versteld. Stilzitten in een rolstoel?

Mooi niet, als het om een C400/C500 Corpus gaat.

Comfort is evenals flexibiliteit het basisconcept.

De C400/C500 is een rolstoel die aangepast is aan de gebruiker.

KEUZES:

- bekleding: skai, stof
- diepte zitting: 36, 41, 46, 51 en 56 cm
- breedte zitting: 43 en 48 cm
- breedte rugsteun: 34, 39 en 44 cm
- hoogte rugsteun: 53 en 60 cm
- lengte armsteun: 25, 30, 35 en 40 cm

OPTIES:

- 200 mm stoellift
- 30° kantelen stoel
- beensteun met tweedelige voetplaat
- beensteun met twee voetplaten
- elektrische beensteunverstelling
- elektrische rugsteunverstelling



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	MATEN										
	Lengte mm	Breedte mm	Min. Transportlengte mm	Zithoogte vaste lift mm	Zithoogte met elekt. stoellift mm	Gewicht incl. accu's kg	Max gewicht gebruiker, kg	Zitbreedte, mm	Zitdiepte, mm	Rughoogte, mm	Armsteunhoogte, mm
alle vermelde maten zijn gemeten conform ISO 7176-7, met standaardkussens en de zitting in een vastgestelde stand.											
C500 Corpus	1150	650	905	560	560 - 770	158	120	430/480	360-560	535/605	190 -290
C500 Corpus Lowrider	1150	650	905	475	475 - 625	158	120	430/480	360-560	535/605	190 -290
C400 Corpus	1085	620	890	560	560 - 770	155	120	430/480	360-560	535/605	190 -290
C400 Corpus Lowrider	1085	620	890	475	475 - 625	155	120	430/480	360-560	535/605	190 -290

OPTIES

MAGIC DRIVE EC

Joystick	x
Werkbladbesturing	x
VIC vingerbesturing	x
Mini-Joystickbesturing	x
Kinbesturing	x
Kinbesturing elektrisch wegzwenkbaar	x
Hoofdbesturing	x
Zuig/blaaas-besturing	x
Zuig/blaaas-besturing elektrisch wegzwenkbaar	x
Multi-schakelaar besturing	x
1-Schakelaarbesturing (incl. Gyro)	x
2-Schakelaarbesturing (incl. Gyro)	x
4-Schakelaar besturing	x
5-Schakelaar besturing	x
Tablet besturing	x
ISO joystick besturing	x


STOEL

PRESTATIES

Afstand tussen armsteun, mm	Onderbeenlengte, mm	Hoek rugleuning-verstelbaar	Hoek beensteun - verstelbaar	Accu capaciteit, AH	Laadtijd, uren	Actieradius, km	Max. snelheid, km/u	Remweg, mm	Draaicirkel ISO 7176-5	Vermogen m.b.t. obstakels, mm
350/400/450	390 - 560	ja	ja	2x73	8	30 - 40	7,5	1200	1110	70
350/400/450	390 - 560	ja	ja	2x73	8	30 - 40	7,5	1200	1110	70
350/400/450	350 - 510	ja	ja	2x73	8	30 - 35	7	1200	1075	60
350/400/450	350 - 510	ja	ja	2x73	8	30 - 35	7	1200	1075	60

TECHNISCHE SPECIFICATIES.

1. Diepte zitting
2. Breedte zitting
3. Hoogte rug
4. Breedte rug
5. Hoofdsteun vanaf zitting
6. Voetsteun tot zitting
7. Hoogte armsteunen

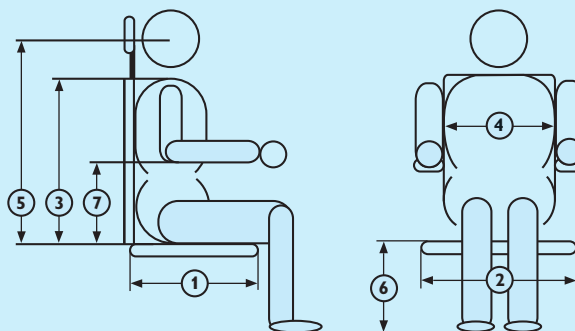

In de tabel ziet u de technische specificaties van al onze modellen. Alle data en feiten zijn nauwkeurig getest conform internationale standaarden en onze eigen veiligheids- en prestatietesten. Gebruik de tabel als overzicht voor de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende stoelen op het gebied van maten, gewicht, bereik enz.

Let op: het bereik kan verschillen, afhankelijk van het soort terrein, het gebruik van de elektrische functies en de capaciteit van de accu.

Op onze website www.permobil.nl staan de productbladen van al onze modellen.

Alternatieve besturingen en communicatie & omgevingsbesturingen

Onze alternatieve besturingsmogelijkheden zijn o.a.:



Hoofdbesturing



Vingerbesturing



Iso-Joystick

PROBLEMEN ZIJN ER OM OP TE LOSSEN.

Dat is de gedachte achter onze alternatieve besturings-systeem en communicatie & omgevingsbesturingen. Ongeacht de handicap kan de rolstoel op een eenvoudige en actieve manier worden bestuurd en gebruikt.

Dankzij de flexibiliteit van het systeem kunnen de meeste problemen worden opgelost. Een knik met het hoofd of een minimale beweging met een vinger kan voldoende zijn om bijvoorbeeld te rijden, een deur te openen, tv te kijken, muziek te luisteren, te telefoneren, de computer te bedienen of een lamp aan en uit te schakelen.

In onze alternatieve besturingen en communicatie & omgevingsbesturingen zijn verschillende functies opgenomen, die aan een eenheid kunnen worden gekoppeld. Dat betekent in de praktijk dat de elektronica aan de behoefte van de gebruiker kan worden aangepast. Elke stoel wordt persoonlijk. Het belangrijkste is om met geavanceerde techniek mogelijk te maken, wat eerder onmogelijk was. Voor veel gehandicapten vormen deze besturingen het verschil tussen iets zelf kunnen doen of om hulp moeten vragen.

Individuele aanpassingen

Het spreekt eigenlijk voor zich dat zoiets belangrijks als een elektrische rolstoel helemaal moet worden aangepast aan de gebruiker. Wij bestellen immers ook auto's, meubels en zelfs mobiele telefoons die precies voldoen aan onze smaak en onze behoeftes. Dat is voor ons bij Permobil vanzelfsprekend. Elke rolstoel is uniek, omdat ieder mens uniek is. Daarom kan elke rolstoel naar keuze uit het **Just You** pakket uitgerust worden met individuele aanpassingen.

Voorbeeld van een individuele aanpassing:

In welke positie de rugleuning ook gezet wordt, het rek blijft altijd op een veilige afstand van de rolstoel.



Het rek is afneembaar om transfer en rolstoel vervoer in auto te vergemakkelijken.



Iets voor jou?

VERKRIJGBAARHEID

Het complete Permobil **Just You** pakket is verkrijgbaar bij alle Permobil dealers. Het pakket wordt aangeboden door Permobil via een huurconstructie.

HUUR

Voor een vastgesteld bedrag per maand wordt een rolstoel gehuurd voor onbepaalde tijd.

De levertijd bedraagt maximaal één week, exclusief individuele aanpassingen. In samenwerking met de dealer wordt de rolstoel met de vereiste persoonlijke instructies afgeleverd op het woon- of verblijfadres van de gebruiker.

Door de modulaire opbouw kunnen de rolstoelen volledig gereconditioneerd worden om weer her te verstrekken.

SERVICE

Via de lokale Permobil dealer bent u verzekerd van snelle en adequate service. Door het "plug-and-play" systeem is snelle reparatie mogelijk. Indien nodig wordt de dealer bijgestaan door Permobil. Hierdoor staat Permobil garant voor een optimaal gebruik van de rolstoelen.





The Art of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11 • 6466 GZ Kerkrade • Nederland
Tel +31 (0) 45 5645480 • Fax +31 (0) 45 5645481 • info@permobil.nl

www.permobil.nl

Wij houden ons bij Permobil BV voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen en we maken daarom een voorbehoud voor eventuele wijzigingen na het drukken van dit boek. Ook wordt een voorbehoud gemaakt voor drukfouten en eventuele andere onjuistheden.